

# USB メモリ(SD カード)に記録した

## お子様のエコー装置映像をパソコンで再生する方法

まずは、お持ちのパソコンの OS をご確認ください。

Windows7の場合は、そのまま再生できます。

WindowsXPまたは Vista の場合、下記手順にて再生ソフトをインストールして下さい。

### ① 再生ソフトインストール方法

(WindowsXP または Vista の場合)

WindowsXP または Vista では、USB メモリに記録したエコー装置映像 (MP4 ファイル形式) を再生するソフトがはいっていません。再生ソフトをインストールして下さい。

おすすめはRealPlayer SP です。


リアルプレーヤーで検索するか

<http://jp.real.com/?mode=rp>


からダウンロード(無料)してください。



\*\*\*\*\*

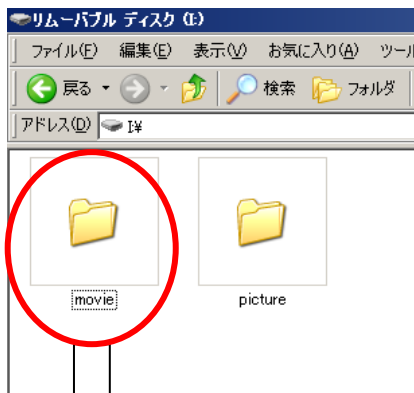

② USB メモリ(SD カード)に記録された映像を再生する  
エコー装置の映像データは、USB メモリ(SD カード)の下記フォルダに保存されています。  
保存場所: ドライブ: ¥movie¥sxga¥    ファイル名: sxga\*\*\*\*\*.mp4  
静止画像はドライブ: ¥picture¥sxga¥    ファイル名: sxga\*\*\*\*\*.jpg  
(注: ドライブは、ご使用のパソコンにより異なります。)

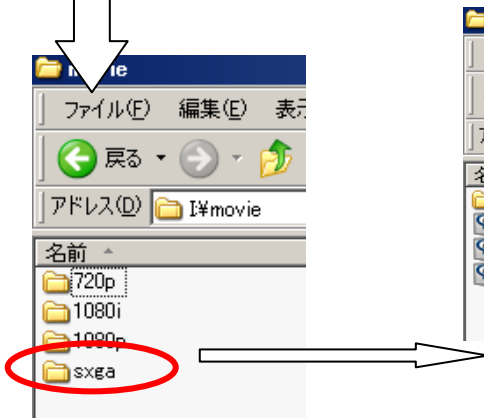

名前	サイズ	種類	更新日時
thumbnail		ファイル フォルダ	2010/09/16 16:32
sxga00000.mp4	11,115 KB	MPEG-4 ファイル	2010/09/16 15:09
sxga00001.mp4	46,601 KB	MPEG-4 ファイル	2010/09/16 15:18
sxga00002.mp4	21,734 KB	MPEG-4 ファイル	2010/09/16 16:33